



Diese Kurzanleitung soll einen Überblick über die wichtigsten Funktionen Ihres MEDIACLAVEs (MC) und grundlegende Anweisungen zum Einstieg geben. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der aktuellen Bedienungsanleitung (BA), die Sie unter www.integra-biosciences.com in verschiedenen Sprachen finden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dies ist ein universelles Laborgerät. Jede Verwendung dieses Geräts in einem medizinischen oder IVD-Umfeld liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers. MEDIACLAVE 10/30 wird zur Herstellung und Sterilisation von Medien verwendet und kann mühelos in ein Wasserbad umgewandelt werden (oder in einen Autoklaven zur Mediensterilisation in Glasgefäßen, nur MC10).

Sicherheitsinformationen


Ungeachtet der hier aufgelisteten Sicherheitshinweise sind zusätzlich alle lokal geltenden Bestimmungen zu beachten.

- 1) Dieses Produkt darf nur in einem geschützten Netzwerk mit überprüften, vertrauenswürdigen Teilnehmern betrieben werden.
- 2) Der MEDIACLAVE darf nur von entsprechend geschultem Personal in der von INTEGRA Biosciences festgelegten Weise verwendet werden.
- 3) Im Fehlerfall darf das Gerät nicht verwendet werden, z. B. wenn der Druckwert nicht angezeigt oder über 1,7 bar liegt, oder heißer Dampf aus dem Sicherheitsventil entweicht. Achtung: Verbrennungs- oder Explosionsgefahr! Das Gerät muss unverzüglich ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt werden. Halten Sie sich vom Gerät fern.
- 4) Beachten Sie die Gefahrenhinweise auf dem Gerät. Vorsicht ist beim Öffnen der Anschlüsse oder dem Kesseldeckel geboten (potenzielles Risiko eines Siedeverzugs). Immer Schutzbrillen und Ofenhandschuhe tragen!
- 5) Die Schläuche können heiß werden. Berühren Sie während des Betriebs nicht die Schläuche.
- 6) Wartungsarbeiten sowie Reparaturen dürfen nur von INTEGRA Biosciences oder einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter vorgenommen werden.
- 7) Es ist **obligatorisch**, dass mindestens einmal jährlich oder nach 1000 Sterilisationszyklen (je nachdem, was zuerst eintritt) eine Wartung durchgeführt wird.

Erste Schritte



Installieren Sie das Gerät auf einer horizontalen Fläche gemäß den IQ- (Art.-Nr. 136951) und OQ- (Art.-Nr. 136952) Dokumenten.

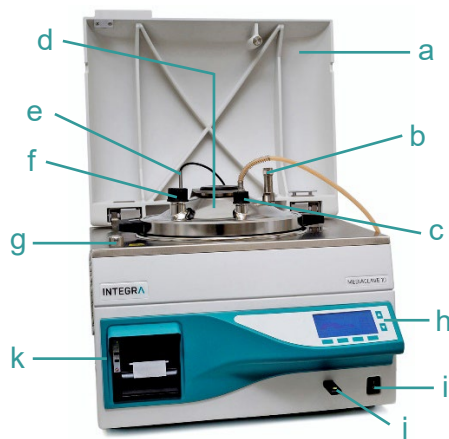

- a. Sicherheitshaube
- b. Sicherheitsventil
- c. Dispensier-Anschluss
- d. Kesseldeckel
- e. Temperatursensor für das Medium
- f. Zugabe-Anschluss
- g. Arretierung der Sicherheitshaube
- h. Bedienfeld
- i. Hauptschalter
- j. USB-Anschluss
- k. Drucker (optional)

Ein- und Ausschalten:

Betätigen Sie den Hauptschalter

INTEGRA

Schalten Sie das Gerät ein. Im HAUPTMENÜ kann auf drei Optionen zugegriffen werden:



- **PROGRAMM WÄHLEN:** ein Programm definieren und ausführen.
- **WARTUNG:** Kessel entleeren oder füllen, das Gerät automatisch reinigen, Funktionstest des Sicherheitsventils durchführen.
- **GERÄTE PARAMETER:** Konfiguration der allgemeinen Geräteparameter, ein Backup auf USB erstellen, etc..

Sprachwahl


Navigieren Sie zu **GERÄTE PARAMETER** und **SPRACHWAHL**. Wählen Sie eine Sprache und drücken Sie **SPEICHERN**. Passen Sie andere Geräte-Parameter an Ihre Bedürfnisse an.

Vorbereitung eines Medienherstellprogramms

- Überprüfen Sie, ob die weiße Drehzapfenscheibe ganz zum Boden heruntergedrückt ist und setzen Sie den Magnetrührer auf den Drehzapfen im Innern des Küvettenbodens.



- Setzen Sie die Küvette in den Kessel des Geräts ein.
- Halten Sie die Küvette an beiden Griffen und drehen Sie sie ca. 2 cm im Uhrzeigersinn, bis der Bolzen einrastet, wie nebenan gezeigt.
- Zum Entnehmen drehen sie die Küvette gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie sie heraus.

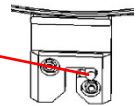

Kopplungswasser befüllen



- Bereiten Sie enthärtetes Kopplungswasser zu: Eine Tasse Leitungswasser oder eine Prise Salz zu destilliertem Wasser hinzufügen, um es leitfähig zu machen, ist für die Füllhöhensensoren erforderlich.
- Navigieren Sie zu **MAINTENANCE**, wählen Sie **ENTLEEREN/BEFÜLLEN** und drücken Sie **KOPPL.W. BEFÜLLEN**.
- Befüllen Sie den Kessel per Hand mit Kopplungswasser bis der obere Füllhöhensensor bedeckt ist (ca. 2,7 l für MC10 und 8,5 l für MC30).

Ein Programm wählen

- Navigieren Sie zu **PROGRAMM WÄHLEN**. Die ersten Programme sind mit Standardwerten vordefiniert:

| Betriebsart | Beschreibung |
|----------------|---|
| STANDARD | zur Herstellung und Sterilisation von Medien |
| CHOCOLATE AGAR | zweistufiges Programm zur Herstellung komplexer Medien |
| AUTOCLAVE | zur Mediensterilisation in Glasgefäßen (nur MC10) |
| WASSERBAD | zum Vorquellen, Erwärmen und Thermostatisieren von Medien |

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Programm aus und drücken Sie **PROGRAMM WÄHLEN** und **PROGRAMM PARAMETER**, um das Programm anzupassen.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Parameter, den Sie verändern möchten. Drücken Sie **ÄNDERN** und folgen Sie den Informationen auf dem Bildschirm.

Ausführen eines STANDARD oder CHOCOLATE AGAR Programms



Das Nennvolumen der Küvetten (10/30L) darf auf keinen Fall überschritten werden. Berücksichtigen Sie Wirbel, Schaum- oder Blasenbildung und Aufquellen.

- Navigieren Sie zu **PROGRAMM WÄHLEN**. Wählen Sie das zuvor definierte **STANDARD** oder **CHOCOLATE AGAR** Programm. Geben Sie Wasser und Zutaten gemäß Rezept in die Küvette. Drücken Sie **START** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.


INTEGRA



Der halbstarre Temperatursensor (MC 10) muss mit größter Vorsicht gehandhabt werden und darf nicht mehr als 30 Grad über die Vertikale gebogen werden. Klemmen Sie das Kabel des flexiblen Temperatursensors (MC30) nicht ein, wenn Sie den Kesseldeckel schließen.



- Schließen Sie den Kesseldeckel, indem Sie ihn an den Handgriffen im Uhrzeigersinn um den Anschlagpunkt drehen. Die Handgriffe (1) müssen über den schwarzen Aufklebern (2) zu liegen kommen.

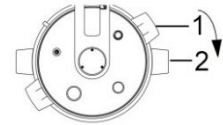

- Schließen Sie die Sicherheitshaube und halten Sie sie nach unten gedrückt bis sie verriegelt ist, nachdem Sie START gedrückt haben.

Dispensieren des Mediums

Ist die Dispensierphase erreicht, ertönt durch ein akustisches Signal (zum Ausschalten $\cancel{\text{X}}$ drücken).

- Drücken Sie START DISPENS. Das Produkt kann nun durch den sterilen Dispensier-Anschluss dispensiert werden. Zum Dispensieren mit einer externen Pumpe, z. B. DOSE IT oder MEDIAJET, drücken Sie STANDARD DISPENS.. (Weitere Dispensieroptionen in der BA.)
- Schrauben Sie den Deckel vom Dispensier-Anschluss ab und führen Sie den sterilen Anschlussstutzen mit Dispensierschlauch (Innendurchmesser 6 mm) ein. Setzen Sie den Schlauch in die externe Pumpe ein.
- Beenden Sie den Prozess durch Drücken von ZURÜCK und zweimal DISPENS. BEENDEN. Öffnen Sie den Kesseldeckel, indem Sie ihn an den Griffen gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Ausführen eines AUTOCLAVE Programms (nur MC10)

Bei der Betriebsart AUTOCLAVE müssen die Autoklavierküvette und der flexible Temperatursensor installiert sein, siehe BA wegen der Längenanpassung.



Der MEDIACLAVE eignet sich nicht für die Sterilisation von Instrumenten, Glasgefäßen und medizinischen Geräten. Alle Behälter müssen während der gesamten Dauer des Prozesses geöffnet sein.

- Navigieren Sie zu **PROGRAMM WÄHLEN**. Wählen Sie das zuvor definierte AUTOCLAVE Programm und drücken Sie START.
- Setzen Sie die mit Medium gefüllten Laborbehälter in die Küvette und verteilen Sie gleichmäßig.
- Füllen Sie den Behälter mit Koppelwasser so, dass der Wasserstand leicht unter der Mediumoberfläche im Inneren des Glasbehälters liegt, zwecks optimaler Wärmeübertragung.
- Stecken Sie den flexiblen Temperatursensor in einen Referenzbehälter.
- Drücken Sie START und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.
- Sobald das AUTOCLAVE Programm beendet ist, drücken Sie ENDE, um die Sicherheitshaube zu öffnen. Öffnen Sie den Kesseldeckel.

Ausführen eines WASSERBAD Programms

In der Betriebsart WASSERBAD bleiben der Kesseldeckel und die Sicherheitshaube offen.

- Navigieren Sie zu **PROGRAMM WÄHLEN**. Wählen Sie das zuvor definierte WASSERBAD Programm und drücken Sie START.
- Zum Thermostatisieren von Medien in Glasgefäßen (nur MC10), installieren Sie die Autoklavierküvette und setzen Sie die Glasbehälter ein. Füllen Sie den Behälter mit Koppelwasser, wie für AUTOCLAVE beschrieben.
- Zum Vorwärmen und Vorquellen von Medien setzen Sie die Küvette mit dem Rührer ein und fügen Sie die Zutaten hinzu. Drücken Sie START.
- Drücken Sie ENDE, um die Thermostatisierungsphase zu beenden.

Wartung



Der MEDIACLAVE muss regelmäßig gereinigt werden, um einen sicheren und verlässlichen Betrieb zu gewährleisten. Tägliche und monatliche Reinigungsarbeiten gemäß BA sind obligatorisch. Stellen Sie vor Beginn der manuellen Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

Täglich:

- Schrauben Sie den Dispensierschlauch ab, entfernen Sie den Absaugschlauch auf der Unterseite des Kesseldeckels und spülen Sie die Schläuche.
- Navigieren Sie am Ende eines Arbeitstages zu **WARTUNG**, wählen Sie ENTLEEREN/BEFÜLLEN und drücken Sie KOPPL.W. ENTLEEREN zum automatischen Leeren des Kessels.
- Reinigen Sie folgende Geräteteile mit einem fusselfreien Tuch und Reinigungsmittel: Küvette; Magnetrührer; Drehzapfen; Temperatursensor; Kessel einschließlich der Füllhöhen Sensoren, Entlüftungsöffnung sowie den Ablass; Kesseldeckel sowie die Dispensier- und Zugabe-Anschlüsse, Sicherheitsventil; Deckeldichtung; Gehäuse. Vermeiden Sie ein Eindringen der Lösung ins Innere des Geräts.
- Wenn Sie Medien mit Salzkonzentrationen über 3 % verwenden, die zu Korrosion von Edelstahl führen, spülen Sie alle Salzreste gründlich mit viel Wasser ab. Tragen Sie ein Chromstahl-Reinigungsmittel auf alle betroffenen Oberflächen gemäß den Anweisungen des Herstellers auf. Entfernen Sie es vollständig mit warmem Wasser und einem Schwamm.
- Trocknen Sie alle Bereiche mit Papierhandtüchern.

Monatlich:

- Navigieren Sie zu WARTUNG, wählen Sie REINIGUNG und befolgen Sie die Bildschirm-anweisungen.
- Navigieren Sie zu **WARTUNG**, wählen Sie SICHERHEIT. VENTIL. Setzen Sie die Küvette ein, füllen Sie den Kessel mit Kopplungswasser und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.
- Führen Sie die tägliche Reinigung einschließlich der Überprüfung der Stahloberflächen durch.
- Prüfen Sie die weiße Drehzapfenscheibe unterhalb des Rührers. Sie muss entfernt werden, wenn sie weniger als 1 mm dick ist.

Geräteentsorgung



Der MEDIACLAVE darf nicht als unsortierter Restmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie den MEDIACLAVE gemäss den in ihrem Land geltenden Verordnungen. In bestimmten Regionen und Ländern, z. B. in EU-Mitgliedstaaten, ist der Händler verpflichtet, dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer kostenlos zurückzunehmen. Bitte wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an Ihren örtlichen Händler.

Hersteller und Kundendienst

| | | |
|--|--|---|
| INTEGRA Biosciences AG Tardisstrasse 201 7205 Zizers, Switzerland | INTEGRA Biosciences Corp. 22 Friars Drive Hudson, NH 03051, USA | Find your local representative: www.integra-biosciences.com info@integra-biosciences.com |
| Direktverkauf | Telefon | Mail |
| Australien | +617 3497 5800 | info-au@integra-biosciences.com |
| Benelux | +31 630 609 866 | info-benelux@integra-biosciences.com |
| China | +86 21 5844 7203 | info-cn@integra-biosciences.com |
| Dänemark, Schweden | +45 3173 5373 | info-nordic@integra-biosciences.com |
| Frankreich | +33 1 34 30 76 76 | info-fr@integra-biosciences.com |
| Deutschland, Österreich | +49 6409 81999 15 | info-de@integra-biosciences.com |
| Japan | +81 3 5962 4936 | info-jp@integra-biosciences.com |
| Schweiz | +41 81 286 95 30 | info-ch@integra-biosciences.com |
| Vereinigtes Königreich, Irland | +44 1635 797000 | info-uk@integra-biosciences.com |
| Vereinigte Staaten, Kanada | +1 603 578 5800 | info-us@integra-biosciences.com |



Konformitätserklärung

INTEGRA Biosciences AG – 7205 Zizers, Schweiz

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Geräte

Beschreibung

Modelle

MEDIACLAVE 10

136 000, 136 005, 136 010, 136 015, 136 020, 136 025

MEDIACLAVE 30

136 050, 136 055

übereinstimmen mit:

EU-Bestimmungen

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EC, 2011/65/EC, 2014/68/EU, 1907/2006

UK-Bestimmungen

S.I. 2016/1101, S.I. 2016/1091, S.I. 2013/3113, S.I. 2012/3032

Die ausführliche, unterschriebene Konformitätserklärung mit Bestimmungen anderer Länder entnehmen Sie bitte der dem Gerät beiliegenden Bedienungsanleitung.