



本快速入门指南旨在让您快速概览 DOSE IT 的重要特点，并提供入门基础说明。详细资料请参阅 [www.integra-biosciences.com](http://www.integra-biosciences.com) 上不同语言版本的操作说明（OI）。

### 适用范围

此产品是一款一般用途的实验室仪器。任何在医疗或IVD环境下的使用均由使用者自行承担所有责任。DOSE IT可编程蠕动泵用于以硅胶管道分配或泵送0.1ml至9999ml体积范围内的液体

### 安全信息

不论下列安全说明如何，都必须遵守当地所有适用的法规。

- 1) DOSE IT只能由经过正确培训的人员以INTEGRA Biosciences指定的方式使用。
- 2) 请遵守设备上的危险警告。请勿将手靠近泵头内部旋转的滚轮，当心夹到手指。
- 3) 保养工作和维修只能由INTEGRA Biosciences或授权的售后服务成员执行。
- 4) 建议定期维护 DOSE IT。

### 入门指南



根据 IQ/OQ 文档 (PN 171273)，将仪器安装在平坦的表面上。电源电压：100-240 VAC, 50-60 Hz, 70 W。

将 AC 适配器电缆连接到 DOSE IT 背面的插座上，然后将适配器插入电源。




- a. 带显示屏和键盘的操作面板
- b. 泵头
- c. 返回键
- d. 电源开关（背面）

打开/关闭：

按下电源开关

打开设备，将进入应用（APPLICATIONS）窗口，并显示以下三个菜单选项：

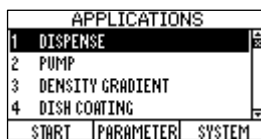

- **开始（START）**：用于执行所选的程序，包括分配（DISPENSE）、泵模式（PUMP）或自定义模式（CUSTOMIZE）。
- **参数（PARAMETER）**：用于定义所选的程序
- **系统（SYSTEM）**：用于配置常规设备参数

### 语言选择

依次进入**系统（SYSTEM）**和语言，选择一种语言并选择保存（SAVE）。根据您的要求设置其他系统参数。

# INTEGRA

## 管道选择



管道的选用取决于对配料速度和精度的要求。管道内径（ID）越大，分配速度越快，但精度越低。下表以精确系数（CV）表示精度，描述了分配量相对于平均值的分布范围。

強烈建議使用 INTEGRA 矽膠管。若採用其他製造商的管路，其管壁厚度必須達到 1.5 毫米。

管道内径	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm
CV < 1% 的配料体积	> 0.5 ml	> 1 ml	> 3 ml	> 7 ml	> 15 ml
流速范围 (ml/min)	0.6-52	2.1-203	4.8-475	8.4-837	16-1634


若在保证分配的 CV < 1%，请在表格中找到所需的配料体积（例如 5 ml，即 > 3 ml）并读取合适的管道内径（如 3 mm）。8mm 管道仅推荐用于泵模式（PUMP）模式。

## 将管道装入泵头



装载管道和操作敞开的泵头时必须保持 DOSE IT 关闭。

- 打开泵头盖。用手指旋轉泵頭兩側的螺絲 (1)。夾具 (2) 上標記 1.6 的調整需依據軟管內徑(ID)而定：

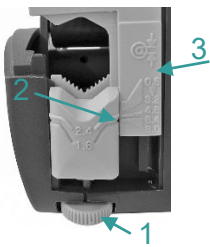

管道内径	夹具的 1.6 刻度线位置 (2)
1 mm	标尺值 3.2 与 4.8 之间 (3)
2 mm	对准标尺 (3) 上的 4.8 刻线
3 mm	对准标尺 (3) 上的 6.4 刻线
4-8 mm	尽可能低，完全打开



- 将管道装入泵头。确保管道跨过滚轮并穿过两端 V-形夹具的中央。小心地关闭泵头。

## 連接管路



將抽吸管的直端插入管路，使凹陷端 (4) 能讓液體暢通流入。

在加藥端，應將凹陷端插入管路，因直端適用於分配作業。

## 改写分配程序

在应用（APPLICATION）窗口中，已使用默认值预先定义了初始程序。

- 使用方向键选择一个需要定义的程序，然后按参数（PARAMETER）开始修改程序。
- 使用方向键选择一个您希望修改的参数。按修改（CHANGE），然后按照屏幕上的信息操作。
- 分配（DISPENSE）模式可用于定量分配，泵模式（PUMP）模式可用于连续地泵送液体。
- 自定义模式允许定义程序，最多包含 20 个独立步骤，详见 OI。例如预定义程序中的密度梯度（DENSITY GRADIENT）、培养皿涂布（DISH COATING）以及 1-10 稀释（DILUTION 1 TO 10）。

## 运行分配程序

- 选择一个预先定义的程序，按开始（START）。
- 将带有吸液管的管道末端放入液体中，按住预装填（PRIME）键直至整个管道全部充满液体且没有气泡。
- 首次运行新程序或使用新管道时，请按校准（CALIBRATE）并按照屏幕上的说明进行分配量的校准。为了减少测量误差，请反复按配料（DOSING）分配十次。按继续（CONTINUE），输入测得的体积后按修改（CHANGE）。然后按继续（CONTINUE）结束校准。
- 按开始（START）。分配过程中，可随时暂停（PAUSE）并调整程序。

## 维护



**DOSE IT 需要定期清洁以确保运行的安全可靠。**  
在进行维护工作时，必须关闭设备并切断电源。

### 清洁:

- 如果 DOSE IT 有污垢，可使用浸有肥皂水或 70% 乙醇溶液的布进行清洁。

### 去污:

- 硅胶管道、管子以及管圈可承受最少 20 分钟的 121 °C 高压蒸汽灭菌处理。如果 DOSE IT 的表面受到污染，可使用浸有适当消毒剂的无绒布轻轻擦拭，然后直接擦干。
- 设备可以用 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 气体(最大浓度 35%)去污 60 分钟。

### 润滑:

- 时常检查泵头的活动部件能否自由活动。不定期地使用特氟龙润滑油对连杆和滚轮进行润滑，详见 OI。

## 设备的废弃处置



DOSE IT 不得与未分类的城市垃圾一起处置。

请依照您所在区域的设备废弃处置管理规定处置 DOSE IT。

在某些地区和国家，例如在所有欧盟成员国，经销商有义务在产品寿命结束时免费收回产品。详情请与当地经销商联系。

## 制造商客户服务

**INTEGRA Biosciences AG**  
Tardisstrasse 201  
瑞士，齐策斯CH-7205

**INTEGRA Biosciences Corp.**  
22 Friars Drive  
美国，哈德森NH 03051

寻找您当地的代表处:

[www.integra-biosciences.com](http://www.integra-biosciences.com)

[info@integra-biosciences.com](mailto:info@integra-biosciences.com)

### **INTEGRA Biosciences (Shanghai) Co., Ltd.**

中国上海自由贸易试验区环科路515

号1110室

邮编: 201315

电话: +86 21 5844 7203

[info-cn@integra-biosciences.com](mailto:info-cn@integra-biosciences.com)



## 符合性声明

INTEGRA Biosciences AG –瑞士，齐策斯7205

自行声明该设备

描述

型号

**DOSE IT P910**

**171000**

**适配器**

**171720**

符合:

### 欧盟指令以及法规

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EC, 2011/65/EC, 1907/2006, 2019/1782

### 英国法规

S.I. 2016/1101, S.I. 2016/1091, S.I. 2013/3113, S.I. 2012/3032

想获取已签署的 CE 声明以及当地国家法规的详情, 请参阅随设备提供的操作说明。