


INTEGRA

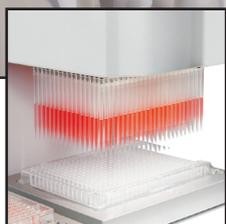

ピペティングワークに革新的なツールを提供

INTEGRA

インテグラ (INTEGRA Biosciences) は、リキッドハンドリング製品と、微生物や細胞の培養のための高品質なツールを製造・販売するリーディングカンパニーです。私たちは、ライフサイエンス分野や医療業界における研究、開発、診断、品質管理分野で活躍されるユーザーのニーズを満たせる、革新的なソリューションを提供することを社是としています。世界中のユーザーと緊密な協力関係を構築しながら、ユーザーのニーズを理解し、最先端の技術を駆使して高品質な製品を作り上げます。



私達の全製品は、スイス連邦共和国ジザーズおよびアメリカ合衆国ニューハンプシャー州ハドソンにて、最も高い品質基準に基づき製造されています。

製品は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、オーストリア、スイスでは直販会社から、その他、100社を超える高度に訓練された国際的な代理店パートナーのネットワークを通じて、世界中のユーザーにお届けしています。

リキッドハンドリング製品



EVOLVE / イボルブ 快速容量可変手動ピペット

容量変更のたびにダイヤルを多数回回す必要がある通常のピペットと異なり、イボルブピペットは容量桁ごとに設けられたダイヤルで容量をセットするため、10分の1のわずかな時間と労力で目的容量に設定できます。グリップチップ技術に基づいた独自のチップ設計により、チップの緩みや液漏れ、脱落はありません。



VIAFLO / バイアフロ 軽量でタッチホイール制御の電動ピペット

バイアフロピペットは、単純な分注から複雑なプロトコルまで、あらゆるピペティングワークに対応します。直感的なタッチホイールとカラー表示により速やかなメニューの選択や容量設定ができます。人間工学に基づいた設計により軽快なピペット操作が可能です。グリップチップ技術に基づいた独自のチップ設計により、チップの緩みや液漏れ、脱落はありません。



VIAFLO 96 | 384 / バイアフロ 96/384 マイクロプレート分注機 - 簡便で経済的

バイアフロ 96 および 384 は手動ピペットの簡便さでデリケートなマルチウェル分注作業を簡素化します。コントロールハンドルに添えた手の動きは内蔵コンピューターとサーボ機構によって増幅され、軽快で直感的なワークフローが可能になります。ヘッドはユーザーが簡単に交換でき24から384(1536)ウェル、0.5 µl~1250 µl の容量範囲のアプリケーションに素早く対応できます。ユーザープログラムによる自動運転も可能です。



VIAFLO ASSIST / ASSIST PLUS インテリジェントなピペティング自動化助手


ASSIST / ASSIST PLUSは、VIAFLOやVOYAGER電動ピペットと組み合わせて、段階希釈、試薬添加、プレートリフォーマット等の作業を自動化します。マルチチャンネルピペティングの人間工学的観点に新しい基準をもたらすだけでなく、オペレーター個人のピペティングスキルの差を排除し、データの再現性を飛躍的に向上させる事が出来ます。





**VOYAGER / ボイジャー チップ間隔
可変マルチチャンネル電動ピペット**

ボイジャーは、バイアフロ電動ピペットの全機能に加えて、高精度な電動チップ間隔可変機構により、スイッチにタッチするだけで、各種のウェルの中心にチップを正確に合わせることを可能にします。異なるウェル間隔のチューブやプレート間の複数サンプルのトランスファー操作を、片手操作のみで迅速に一括完了でき、時間と労力の大幅な低減を実現します。

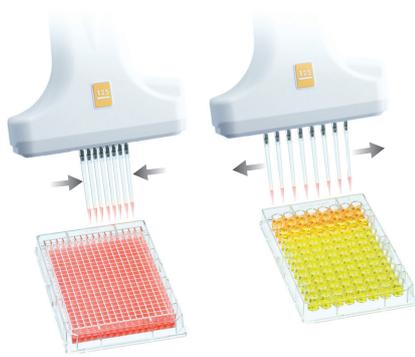

GripTips / グリップチップ
あなたのピペットチップは二度と漏液や、緩みや、脱落はありません！

チップの確実なシーリングと堅固な装着は効率的な分注作業に最も重要な要素です。グリップチップはすべてのインテグラピペットとの組み合わせで、システムとしてチップ着脱に必要な力の最小化と効果的なチップ脱落防止を実現しています。滅菌、フィルター、低吸着、ワイドボアタイプにも対応しています。



VIAFILL / バイアフィル
簡単な操作のバルク試薬プレート分注機

タッチパネルのグラフィカルユーザーインターフェイスなので簡単に操作できます。8チャンネルまたは16チャンネルカセットを使用して、6ウェルから1536ウェルの標準あるいはディープウェルプレートへの分注が高速で可能です。



**VIAFILL Plate Stacker /
バイアフィル プレートスタッカー**
無人で連続プレート分注が可能

バイアフィルにプレートスタッカーを追加するとスリーブが大幅に向上し無人操作が可能になります。ウェルプレートは25または50枚のプレート用に設計された取り外し可能なチムニーに収容されます。スタッカーは標準プレート以外に各種の高さのディープウェルプレートを処理可能です。またほとんどのプレートの蓋と互換性があり蓋付きプレートを処理できます。



Clear Advantage™ / 試薬リザーバー
環境にやさしく、捨てるのはリザーバーインサートだけ

インテグラの使い捨て試薬リザーバーは、ほとんどすべてのピペティングアプリケーションにおいて、非溶剤ベースの試薬の一時的な保管に使用することが出来ます。インテグラ試薬リザーバーは、くっきり見える数字や目盛り、再利用可能なベースと、低コストで積み重ね可能なポリスチレンまたはポリプロピレン製リザーバーインサートを提供します。インサートは一時的な蓋としても使用でき 汚染を低減します。



PIPETBOY acu 2 / ピペットボーイ アキュ2 軽量化と高速化の結晶

第二世代のピペットボーイ アキュ2は大幅な軽量化を実現するとともにピペッティング速度が更に向上しました。比類のない分注精度、カラフルな外観、完全にバランスした持ちやすさ等はそのまま継承しています。すなわち、世界で最も人気のあるピペッターが更に良くなったのです!



PIPETBOY pro / ピペットボーイ プロ 賢明で明るく照らすピペッター

人間工学研究者のアドバイスに従って設計されたピペットボーイプロは、ピペット操作を軽快にしました。内蔵されたLEDライトは作業エリアを明るく照らします。ボディ色として5種類が用意されており、好みの色あるいは研究グループごとに異なる色をお選びいただけます。



VACUSAFE / バキュセーフ 安全な吸引収集システム

バキュセーフ吸引システムは、廃液を収集し処分するための安全かつユーザーフレンドリーで応用範囲の広い方法を提供します。バキュセーフは危険な廃液からユーザーを守るための理想的なソリューションを提供します。バキュボーイ ハンドオペレーター は各種の容器から効率よく廃液を収集することを手助けします。



VACUSIP / バキュシップ Liquid waste gone in a sip!

バキュシップは比較的少量の廃液を吸引するための理想的なベンチトップソリューションです。運転は静かで外部の真空源が不要であり、ベンチの何処にでも収まるコンパクトで安全かつすぐに使用できる真空吸引システムです。バキュシップは軽量で、完全な可動性があり、広範な容器に対応できるよう各種のハンドツールが付属しています。



VACUBOY / バキュイボーイ 多目的真空吸引ツールセット

バキュボーイはポンプ等の真空源をユーザーフレンドリーな吸引システムに変換する便利な吸引ツールセットです。実験室のあらゆる容器からボタンを押すだけで、或は押し方で微妙にコントロールしながら、液体(廃液)を吸引できます。各種の異なる形状のアダプターから構成され、研究室で使用されるいろいろな容器に対応できます。バキュセーフの応用範囲を大きく広げる最適なオプションです。

培地作成滅菌分注システム

火炎殺菌装置



MEDIACLAVE / メディアクレープ 高速で高い再現性の培地滅菌システム

メディアクレープは、最大10または30リットルの培地の迅速かつ優しい滅菌を可能にした全自動培地作成システムです。

滅菌中の温度と圧力の正確な監視と制御により高い再現性の高品質培地の提供を保証します。日本語を含む多言語に対応し、直感的で分かりやすいプログラミングにより操作がとて簡単です。デジタルドキュメンテーションやFDA/GMP準拠のデジタル認証が可能です。



DOSE IT / ドーシット 小型で使いやすいペリスタポンプ

ドーシットは簡単に設置でき、各種パラメーターの設定は分かりやすく、使い易いペリスタポンプです。重量も軽く、研究室のどの場所にも設置可能で、移動も容易です。大型画面のディスプレイと直感的なユーザーインターフェイスにより簡単にパラメータを設定したり動作させる事が出来ます。いったん設定が終わったら、次回からはプロトコルを選びRUNを押すだけです。



FIREBOY / ファイヤーボーイ ポータブルで安全なブンゼンバーナー

ファイヤーボーイは、炎を連続的に監視するセンサーと過温度保護機能により、最高の安全を保証します。ボタンかフットスイッチによって電氣的に点火します。加えてファイヤーボーイプラスは燃焼時間制限の設定や光センサーによるハンズフリー点火等の機能を持ち、グラフィカルユーザインタフェースから容易に設定できます。



MEDIAJET / メディアジェット 無人運転ができる高信頼性培地分注システム

メディアジェット培地分注システムは培地プレート、2分割プレート、各種サイズの試験管(チューブフィラーオプション必要)に連続自動分注できるシステムです。

メディアクレープと組み合わせて、最大10または30リットルの培地を培養容器に連続的に分注することができます。



MEDIAJET TUBEFILLER / メディアジェットチューブフィラー 2つのアプリケーションを一つのシステムで実現

独特なチューブフィラーオプションはメディアジェットの持つ機能を拡張するもので、培養プレート分注機を現場で試験管分注機に変える事が出来ます。様々なサイズの試験管への培地の連続充填用に設計されており、寒天スラント、プロス培地や、NaCl 希釈等に適しています。



FLAMEBOY / フレームボーイ ポータブル火炎殺菌装置

フレームボーイは便利なピエゾ電気点火式の携帯型火炎殺菌装置です。ガスカートリッジ用のアダプタを装備すればガス分配配管やガス栓が無いところでも自由に使用することが出来ます。

直販会社

USA

INTEGRA Biosciences Corp.
Hudson, NH 03051, USA
T +1 603 578 5800
F +1 603 577 5529
info-us@integra-biosciences.com

UK

INTEGRA Biosciences Ltd.
Thatcham, Berks RG19 4EP, UK
T: +44 1635 797000
F: +44 1635 797001
info-uk@integra-biosciences.com

China

**INTEGRA Biosciences
(Shanghai) Co., Ltd.** 中国上海自由贸易
易试验区环科路515号1110室
邮编: 201315
电话: +86 21 5844 7203
info-cn@integra-biosciences.com

Switzerland


INTEGRA Biosciences AG
7205 Zizers, Switzerland
T +41 81 286 95 55
F +41 81 286 95 07
info-ch@integra-biosciences.com

Germany/Austria

INTEGRA Biosciences Deutschland GmbH
35444 Biebertal, Deutschland
T +49 6409 81 999 15
F +49 6409 81 999 68
info-de@integra-biosciences.com

France

INTEGRA Biosciences SAS
95062 Cergy-Pontoise Cedex 1, France
T +33 (0)1 34 30 76 76
F +33 (0)1 34 30 76 79
info-fr@integra-biosciences.com

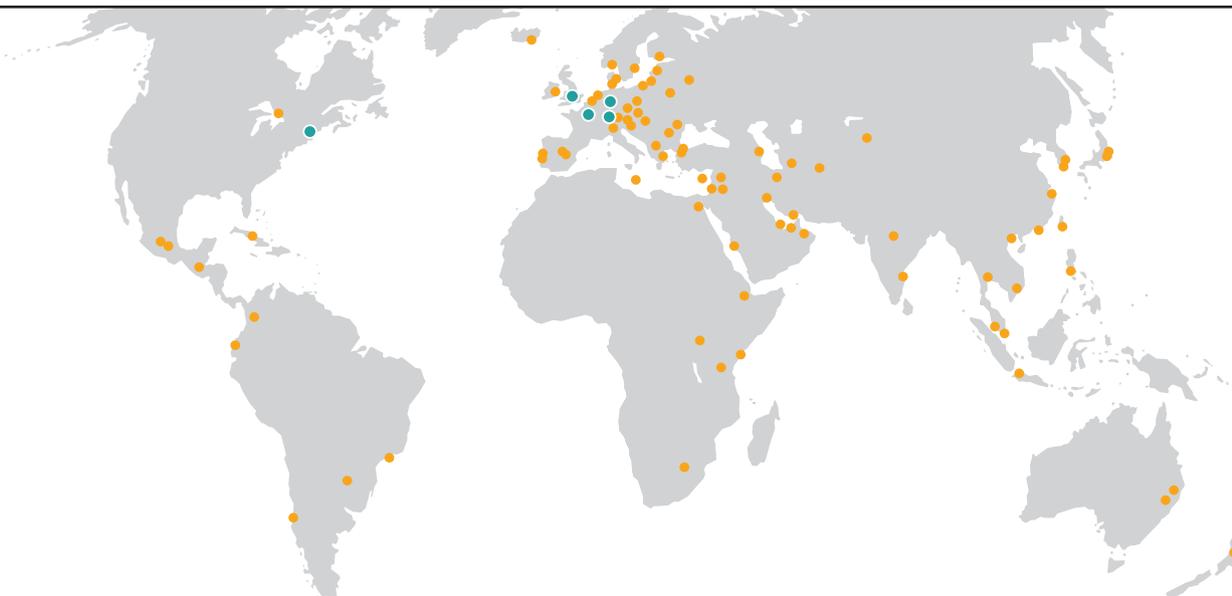

代理店ネットワーク

高度な知識と長い経験を持つ、販売、流通とサービスのパートナーの世界的なネットワークは、高いレベルのユーザーサポートを保証します。世界の代理店ネットワークの詳細は当社のウェブサイト www.integra-biosciences.com をご覧ください。



INTEGRA Biosciences AG

7205 Zizers, Switzerland

T +41 81 286 95 30

F +41 81 286 95 33

INTEGRA Biosciences Corp.

Hudson, NH 03051, USA

T +1 603 578 5800

F +1 603 577 5529

info@integra-biosciences.com

www.integra-biosciences.com

INTEGRA