



INTEGRA

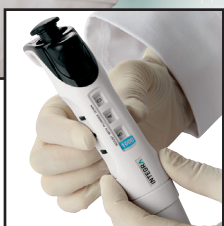

高效移液的创新实验室工具

液体处理产品

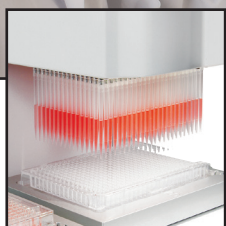

EVOLVE

手动移液器 - 快速容量调节

不同于传统移液器利用单个旋转柱塞来设定体积，EVOLVE的特点是配有三个可独立调节的刻度旋钮来快速设定体积，只需要简单的压低并旋转柱塞解锁，即可转动旋钮调整设定体积。这一革命性的设计能使用户设定体积的速度提高十倍以上。EVOLVE手动移液器独一无二的枪头适配设计使Griptip枪头永不松动、漏液或脱落。



VIAFLO

轻型电动移液器 - 触摸转盘界面

VIAFLO 轻型电动移液器能适应任何移液任务，从单一转移到复杂的处理流程均可胜任。直观的触摸转盘界面和彩色屏幕极为简单易用，让用户能以最快速度调整移液体积。符合人体工程学的设计令使用非常轻松。独特的枪头锁定技术使VIAFLO 能够确保Griptips枪头永不松动、漏液或脱落。



VIAFLO 96 | 384

微孔板移液器 - 易于使用且价格亲民

VIAFLO 96 和VIAFLO 384开创了手持式微孔板移液的新方法。移液运动由手部引导，伺服电机提供助力，直观易用，使移液工作流程变得格外轻松、精确。10种可选的移液头可随时更换，以快速适应任何0.5µl到1250µl范围内的24, 96或384孔移液应用。



ASSIST / ASSIST PLUS

多通道移液器自动化-旨在最佳效果和无与伦比的人体工学体验


ASSIST移液机器人系列实现了INTEGRA电动多道移液器自动化，使科学家从常规移液任务中解放出来，例如系列稀释、样品重构和试剂添加。它提供了出色的移液重复性，并在人体工程学设计方面树立了新的标准。





VOYAGER
可调枪头间距的多通道电动移液器

通过按键，用户能够单手快速调节VOYAGER的移液头间距，以高效完成不同规格实验室容器间的移液操作。高分辨率电动枪头间距调整确保了便捷且最理想的样品定位。

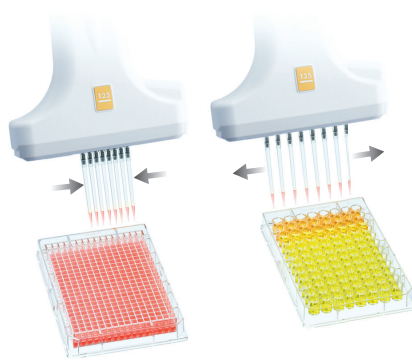

GripTips
您的枪头将永不松动、漏液或脱落！

枪头与移液器的可靠密封和牢固附着是有效移液的关键。GripTips枪头能够与INTEGRA移液器构成独特的系统，具有最低的装载/卸除力，有效避免枪头的脱落。



VIAFILL
简单易用的试剂分液器

具有触摸屏图形用户界面，易于编程。用户可在8道和16道分液盒间快速切换，快速填充6到1536孔范围内的微孔板。



VIAFILL Plate Stacker
自动微孔板叠板机

添加微孔板叠板机可提高通量，并实现无人值守操作。可装卸的烟囱型叠板机可便捷地存放25至50块微孔板，可以处理标准板或不同深度的深孔板，并且兼容大多数带盖微孔板。



Clear Advantage™
试剂储液槽
丢弃一次性插槽保留底座

一次性试剂储液槽被广泛用于几乎所有实验室移液应用中的非溶剂液体暂存，此种储液槽体系由低成本、易堆叠储存的聚苯乙烯或者聚丙烯材质储液插槽和具有清晰的刻度线且可重复利用的底座构成。



PIPETBOY acu 2
电动移液器 - 更轻、更快

第二代PIPETBOY acu重量更轻，速度更快。除此之外，PIPETBOY acu 2仍然保持着无与伦比的移液精度、完美的重量平衡及多样的颜色选择。简而言之，全世界最受欢迎的电动移液器已更加出色！



PIPETBOY pro
电动移液器 - 先进的移液

PIPETBOY pro根据人体工学设计，使移液操作毫不费力。集成的LED灯可为工作区域提供完美的照明，确保移液万无一失。PIPETBOY pro有五种不同机身颜色，可根据个人喜好和实验室分工选择。



VACUSAFE
真空吸液系统 - 安全处理生物废液

VACUSAFE真空吸液系统可为实验废液收集和提供安全、易用、灵活、多功能的解决方案。它与VACUBOY手持式操作器连接可构成非常高效的吸液工具，能够应对大多数实验室容器。VACUSAFE是安全收集保存有害废液并提供最大限度个人防护的理想解决方案。



VACUSIP
真空吸液器 - 轻松处理生物废液

VACUSIP是理想的小体积废液吸取收集解决方案。VACUSIP设计紧凑，安全易用，静音且适用于所有实验室台面，无需外接真空源和电源。VACUSIP重量轻，可随时移动，还配有可连接多种吸取配件的手持吸液工具，以达到最佳的吸液灵活性。



VACUBOY
多功能吸液手操作器

VACUBOY是一款非常便捷的吸液工具，能将真空源转化为易用的系统。通过链接多种不同的吸头配件，VACUBOY可适用于任何尺寸和形状的实验室容器。只需一个按钮，即可随心所欲地吸取液体。VACUBOY能与VACUSAFE吸液系统构成完美的吸液组合。

培养基制备

火焰灭菌



MEDIACLAVE

快速、均一的全自动培养基制备器

MEDIACLAVE目前有两种型号可选，可快速而温和地灭菌处理最多10或30升培养基。灭菌期间可精确控制和监测温度与压力，以确保培养基质量始终如一。同时，直观的多语言用户界面和简单的编程使MEDIACLAVE非常容易操作。



DOSE IT

结构紧凑、易用使用的蠕动泵

DOSE IT的操作简单，参数设定直观易懂，重量轻，可放置在实验室的任何位置且便于移动。大屏显示与直观的用户界面使用户能够轻松地设定各种参数并操作DOSE IT。只需选择分液流程并按下按钮即可开始工作。



FIREBOY

便携式安全火焰喷灯

FIREBOY具有连续火焰监测和过热保护功能，能够最大限度地确保应用安全。压电点火装置可通过按键或脚踏开关触发。FIREBOY plus还配备了图形用户界面，使设定最长燃烧时间等操作更加直观方便。此外，由光学传感器触发的点火装置能够大大减少手动操作。



MEDIAJET

可靠的全自动培养基分装系统

MEDIAJET培养基分装系统具有独一无二的灵活性，可填充培养皿、双室培养皿 (Bi-Plates) 以及不同规格的试管。MEDIAJET可与MEDIACLAVE完美配合，连续将最多30升培养基分装至培养皿。



MEDIAJET TUBEFILLER

一套系统，两种应用

独特的TUBEFILLER选项是MEDIAJET 在功能上的完美拓展，可在短短一分钟内由培养皿填充器转换为试管填充器。TUBEFILLER专为连续填充各种规格的试管而设计，适用于大多数定量分装应用，包括琼脂斜面、肉汤培养基以及生理盐水培养基 (NaCl稀释液) 的制备等。



FLAMEBOY

便携式火焰灭菌喷枪

FLAMEBOY是一款得心应手的便携式火焰灭菌喷枪，采用压电点火。FLAMEBOY所配备的储气罐使其能够独立于外部的燃气供应系统，可随时随地使用。

INTEGRA 是世界领先的高品质实验室工具供应商，产品涵盖液体处理和培养基制备。我们致力于开发创新性解决方案，以满足生命科学领域与医药行业客户在研发、诊断和质量控制中的需求。我们始终与全球用户密切合作，将当前的市场需求直接转化为具有尖端技术的高品质产品。

我们位于瑞士齐策斯市（Zizers, Switzerland）和美国新罕布什尔州哈德逊（Hudson NH, USA）的工厂遵照最高质量标准，所有的产品都在这里生产。得益于我们在美国、法国、德国、奥地利和瑞士的直销机构以及由全球100多家训练有素的分销伙伴构成网络，我们将产品远销世界各地。INTEGRA Biosciences AG是ISO 9001认证企业。



INTEGRA Biosciences AG
瑞士，齐策斯市 7205
T +41 81 286 95 30
F +41 81 286 95 33

info@integra-biosciences.com
www.integra-biosciences.com

**INTEGRA Biosciences
(Shanghai) Co., Ltd.**
中国上海自由贸易试验区环科路515
号1110室
邮编：201315
电话：+86 21 5844 7203
info-cn@integra-biosciences.com

INTEGRA Biosciences AG is an ISO 9001 certified company.