



PIPETBOY acu 2

Pipetage sérologique léger et rapide

Le pipeteur auquel les scientifiques du monde entier font confiance

Pipeteur
ergonomique

Contrôle parfait
de la manipulation des liquides

Contrôleur de haute qualité
pour les pipettes de 1 à 100 ml

Pipettes de haute qualité
de volumes de 1 à 100 ml

Contrôleur de pipettes léger et ergonomique

Système de valve et de dosage unique, depuis la distribution par gravité en passant par le goutte-à-goutte jusqu'au déplacement rapide de liquide.

Pipettes sérologiques avec graduation bidirectionnelle facile à lire.



Léger et conçu de façon ergonomique pour épouser confortablement la forme de la main, tandis que les doigts gardent une position naturelle lorsqu'ils appuient sur les boutons.

La promesse du pipetage sérologique INTEGRA

Nos pipeteurs **PIPETBOY** sont l'une des aides au pipetage les plus utilisées et les plus fiables depuis plus de 40 ans. Ils offrent une solution de pipetage méticuleuse ainsi qu'une ergonomie exceptionnelle et un contrôle inégalé sur les vitesses d'aspiration et de distribution des liquides.

Chaque **PIPETBOY acu 2** bénéficie d'une garantie de 3 ans.* Comme tous nos pipeteurs, il vient compléter parfaitement nos pipettes sérologiques de haute qualité. Ces pipettes sont disponibles dans une large gamme de volumes – de 1 à 100 ml – et chaque pipette à partir de 25 ml est également dotée d'un système antigoutte pour des performances optimales. Nous vous proposons donc une solution complète couvrant l'ensemble de vos besoins en matière de pipetage sérologique ainsi qu'une assistance et des conseils quand vous en avez besoin.

* Après avoir enregistré le produit

** Le mode de distribution répétée n'est disponible qu'avec les pipettes sérologiques INTEGRA.

Le saviez-vous?

En plus du **PIPETBOY acu 2**, nous proposons des contrôleurs de pipettes **PIPETBOY GENIUS**. Le **PIPETBOY GENIUS** dispose de toutes les fonctionnalités du **PIPETBOY acu 2**, mais est aussi conçu pour permettre la distribution répétée en appuyant sur un bouton, ce qui accélère votre flux de travail.**



Performance

Découvrez les avantages de **PIPETBOY acu 2**.

- Vitesse de pipetage rapide (jusqu'à 13,5 ml/sec pour une pipette de 50 ml) en mode turbo*.
- Pipetage non-stop pendant plus de 6,5 heures
- Pipetage précis et contrôle de la vitesse :
 - La vitesse maximale peut être réglée à l'aide de la molette située à l'arrière de l'appareil
 - Contrôle sensible du liquide – jusqu'à la vitesse maximale pré-réglée avec boutons d'aspiration et de distribution actionnés par le doigt
 - Système de valve et de dosage unique, depuis la distribution par gravité en passant par le goutte-à-goutte jusqu'au déplacement rapide de liquide
- Léger (195 g), équilibré et ergonomique. Le poids se concentre sur la poignée. Il offre une prise en main confortable et permet aux doigts de conserver une position naturelle lorsque vous appuyez sur les touches
- Peut être placé sur le dos lorsqu'il n'est pas utilisé

* PIPETBOY acu 2 doit être connecté au secteur pour le mode turbo, sinon la vitesse maximale est de 11,5 ml/sec.



Qualité

- Plus de 40 ans d'expérience avec des milliers de clients satisfaits
- Fiable, haut de gamme et avec une garantie de 3 ans après enregistrement
- Conçu pour éviter toute contamination :
 - Versions stériles/non stériles de 0,2 et 0,45 µm pour chaque application
 - Le module stérile (embout nasal) est autoclavable pour les applications critiques



Pipettes sérologiques INTEGRA

Conception

- Large gamme de volumes (1-100 ml)
- Conception antigoutte (pipettes de 25, 50 et 100 ml)
La pointe de la pipette sérologique INTEGRA est conçue pour réduire le risque d'écoulement des pipettes, en particulier lors du transfert de volumes de liquide importants.
- L'embout coloré de la pipette sert d'identifiant, permettant une distribution répétée et une protection contre les débordements lorsqu'elle est utilisée avec le **PIPETBOY GENIUS**.

Qualité

- Exactitude à ± 2 % du volume nominal
- Matériau en polystyrène clair
- Matériau stérile, d'origine non animale
- Suivi facile des numéros de lot sur le centre de téléchargement INTEGRA <https://www.integra-biosciences.com/france/fr/support/telechargement>



Lecture

- Graduation bidirectionnelle facile à lire
- Graduation négative pour un volume de travail supplémentaire

Emballage

- Boîte de distribution pour pipettes en emballage individuel
- Pipettes en vrac fournies dans des sachets refermables à fermeture éclair

Options d'emballage

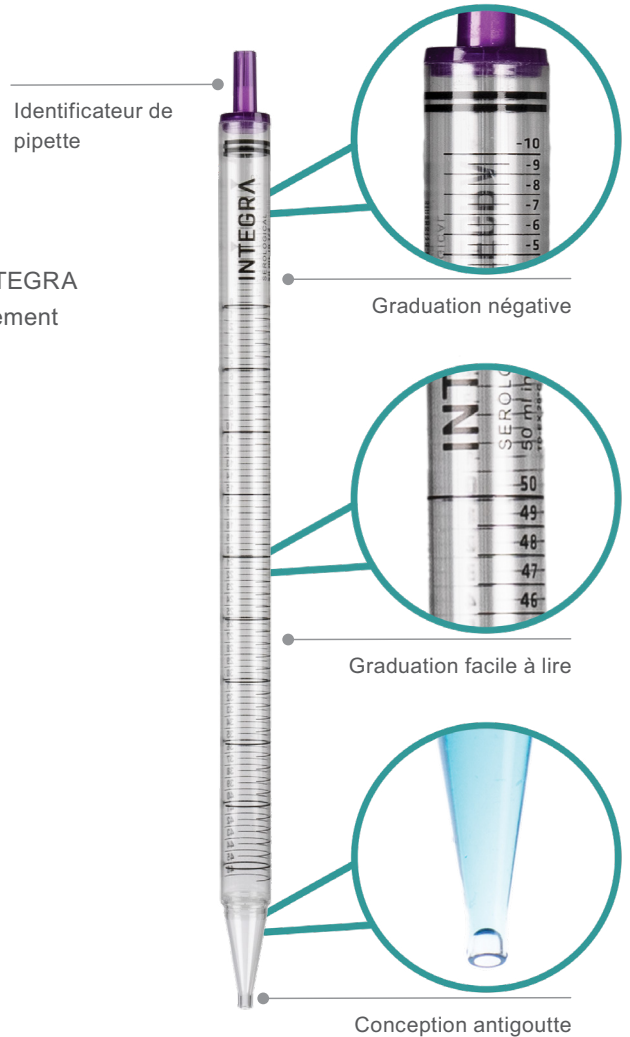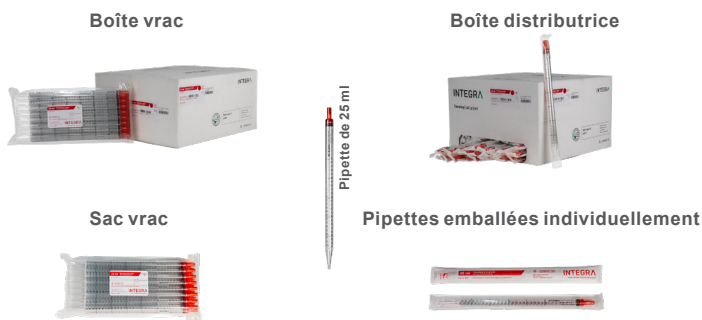

Choisissez la meilleure solution

Le **PIPETBOY acu 2** est le seul instrument de pipetage du marché disponible en neuf couleurs.

- Apportez de la couleur dans votre laboratoire en choisissant votre design préféré
- Attribuez des couleurs spécifiques afin de différencier chaque application et d'éviter de mélanger les utilisations, tout en travaillant de façon plus sécuritaire



Informations de commande

Instrument	Coloris	Réf. art.
PIPETBOY acu 2 Pipeteur avec batterie lithium-ion, adaptateur secteur, filtre stérile 0,45 µm de rechange et support mural. Un couteau suisse de poche gratuit est inclus pour chaque nouveau PIPETBOY acu 2 acheté.	classique	155 000
	vert	155 015
	rouge	155 016
	bleu	155 017
	transparent	155 018
	violet	155 019
	agave	155 022
	ocean dream	155 023
	pink sunrise	155 024



Accessoires	Réf. art.	
Support pour PIPETBOY et VACUBOY	155 065	
Support mural	155 521	
Adaptateur secteur (100-240 VAC, 50/60 Hz)	Version EU	153 210
	Version US	153 211
	Version UK	153 214
	Version AU	153 216

Consommables	Réf. art.
Filtre 0.45 µm stérile/non stérile, veuillez vous référer à notre site web pour les numéros de pièces spécifiques à chaque pays	
Filtre 0.2 µm stérile/non stérile, veuillez vous référer à notre site web pour les numéros de pièces spécifiques à chaque pays	
Batterie pour PIPETBOY acu 2, li-ion	155 066

Pipettes sérologiques

Pipettes emballées individuellement	Réf. art.	Quantité
1 ml	1401	1000
2 ml	1402	1000
5 ml	1403	200
10 ml	1404	200
25 ml	1405	200
50 ml	1406	100
100 ml	1407	100

Pipettes en vrac	Réf. art.	Quantité
1 ml	1501	1000 (25 par sac)
2 ml	1502	1000 (25 par sac)
5 ml	1503	500 (25 par sac)
10 ml	1504	500 (25 par sac)
25 ml	1505	200 (25 par sac)
50 ml	1506	100 (25 par sac)
100 ml	1507	100 (10 par sac)

Caractéristiques techniques

Vitesse maximale de pipetage	13,5 ml/s (avec une pipette de 50 ml)
Distribution par gravité	Légère pression sur le bouton de distribution
Compatibilité des pipettes	Pipettes en verre et en plastique de 1 à 100 ml
Protection du filtre	0,45 µm (inclus) ou 0,2 µm (à commander séparément)

Poids	195 g
Conditions d'utilisation	5-40 °C, max. 80 % RH
Durée de fonctionnement	Min. 5 500 cycles de pipetage de 25 ml (avec batterie entièrement chargée)
Alimentation électrique	100-240 VAC, 50/60 Hz
Batterie	Rechargeable, lithium-ion, 500 mAh



Nous contacter :

