



PIPETBOY acu 2

Leichtes und schnelles Arbeiten mit serologischen Pipetten
Die Pipettierhilfe, auf die sich Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler weltweit verlassen

Ergonomie

Pipettierhilfe
perfekt
ausbalanciert

Perfekte Kontrolle

beim Liquid-Handling

Hochwertige Pipettierhilfe

für Pipetten von 1 bis 100 ml


Qualitativ hochwertige Pipetten

in Mengen von 1-100 ml

Leichte und ergonomische Pipettierhilfe

Einzigartiges Ventil- und Dosiersystem, von der tropfenweisen Schwerkraftdispensierung bis zur schnellen Flüssigkeitsverdrängung.

Serologische Pipetten mit leicht abzulesenden, bidirektionalen Volumenmarkierungen.

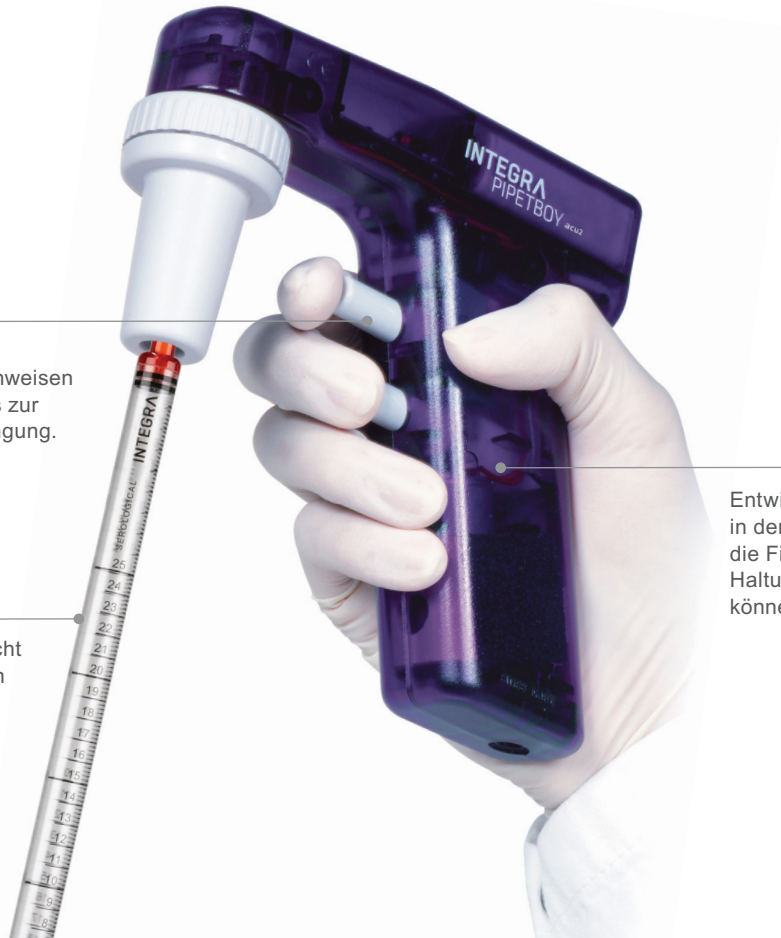

Entwickelt um ergonomisch in der Hand zu liegen, wobei die Finger in einer natürlichen Haltung die Tasten bewegen können.

Das INTEGRA-Versprechen zum serologischen Pipettieren

Unsere **PIPETBOYS** gehören seit über 40 Jahren zu den meistgenutzten und bewährtesten Pipettierhilfen. Dies bietet eine präzise Lösung für Arbeiten mit einer Pipettierhilfe mit einer unübertroffenen Kontrolle der Geschwindigkeit der Flüssigkeitsaufnahme und -abgabe.

Jeder **PIPETBOY acu 2** hat eine 3-jährige Garantie* und ist, wie alle unsere Pipettierhilfen, die perfekte Ergänzung zu unseren hochwertigen serologischen Pipetten. Sie sind für ein breites Spektrum an Volumina – von 1 bis 100 Milliliter – erhältlich, und jede Pipette ab 25 Milliliter verfügt zudem über ein Design mit Tropfschutz. Eine umfassende Lösung für sämtlichen Bedarf beim Arbeiten mit serologischen Pipetten inklusive Support und Beratung, falls gewünscht.

* Nach der Produktregistrierung

** Der Mehrfachdispensier-Modus ist nur verfügbar, wenn die Pipettierhilfe in Kombination mit serologischen Pipetten von INTEGRA verwendet wird.

💡 Schon gewusst?

Neben dem **PIPETBOY acu 2** bieten wir auch **PIPETBOY GENIUS**-Pipettierhilfen an. Der **PIPETBOY GENIUS** verfügt über alle großartigen Funktionen des **PIPETBOY acu 2**, ist aber zusätzlich so konzipiert, dass er **Mehrfachdispensieren auf Knopfdruck ermöglicht, um Ihren Arbeitsablauf zu beschleunigen. ****



Leistung

Entdecken Sie die Vorteile des **PIPETBOY acu 2**.

- Hohe Pipettiergeschwindigkeiten (mit bis zu 13,5 ml/s bei 50-ml-Pipetten) im Turbomodus*
- Über 6,5 Stunden ohne Unterbrechung pipettieren
- Präzises Pipettieren und Geschwindigkeitssteuerung:
 - Die maximale Geschwindigkeit kann mit dem Daumenrad auf der Rückseite eingestellt werden
 - Sensible Flüssigkeitskontrolle durch Drücken der Ansaug und Diespensiertasten
 - Einzigartiges Ventil- und Dosiersystem, von der tropfenweisen Schwerkraftdispensierung bis zur schnellen Flüssigkeitsverdrängung
- Leicht (195 g) und ergonomisch. Durch den Schwerpunkt im Griff liegt die Pipettierhilfe angenehm in der Hand und ermöglicht den Fingern, beim Drücken der Tasten eine natürliche Position beizubehalten
- Kann bei Nichtgebrauch auf den Rücken gelegt werden

* Schließen Sie den PIPETBOY acu 2 an das Stromnetz an, wenn Sie den Turbomodus benutzen wollen. Ansonsten beträgt die Höchstgeschwindigkeit 11,5 ml/s.



Qualität

- Über 40 Jahre Erfahrung, mit Tausenden glücklicher Kunden
- Zuverlässige, hohe Qualität und 3 Jahre Garantie bei Registrierung
- Entwickelt, um Kontamination zu verhindern:
 - 0,2 und 0,45 µm sterile/unsterile Versionen für jede Anwendung
 - Sterilmodul (Nasenstück) ist für kritische Anwendungen autoklavierbar



Serologische Pipetten von INTEGRA

Design:

- Breites Spektrum an Volumen (1 – 100 ml)
- Tropfsicheres Design (25-, 50- und 100-ml-Pipetten)
Die Spitze der serologischen Pipette von INTEGRA ist so gestaltet, dass das Risiko des Nachtropfens der Pipette verringert wird, insbesondere beim Transfer größerer Flüssigkeitsmengen.
- Das farbige Mundstück der Pipette dient als Erkennungsmerkmal, ermöglicht bei Verwendung des **PIPETBOY GENIUS** das Mehrfachdispensieren und verhindert das Überfüllen

Qualität

- Genauigkeit $\pm 2\%$ des Nennvolumens
- Durchsichtiges Polystyrol
- Steriles, nicht von Tieren stammendes Material
- Einfache Verfolgung der Chargennummern über das INTEGRA Download Center <https://www.integra-biosciences.com/en/support/downloads>

Ablesen

- Leicht abzulesende, bidirektionale Volumenmarkierungen
- Negativgraduierung zur Erschließung von zusätzlichem Arbeitsvolumen

Verpackung

- Spenderbox für einzeln verpackte Pipetten
- In Großmengen gelieferte Pipetten sind in Schiebeverschlussbeutel verpackt, die sich leicht öffnen und wieder verschließen lassen

Verpackungsoptionen

Großpackung



Beutel mit mehreren Pipetten




Verpackung der Einzelentnahme



Einzeln verpackte Pipetten



25-ml-Pipette

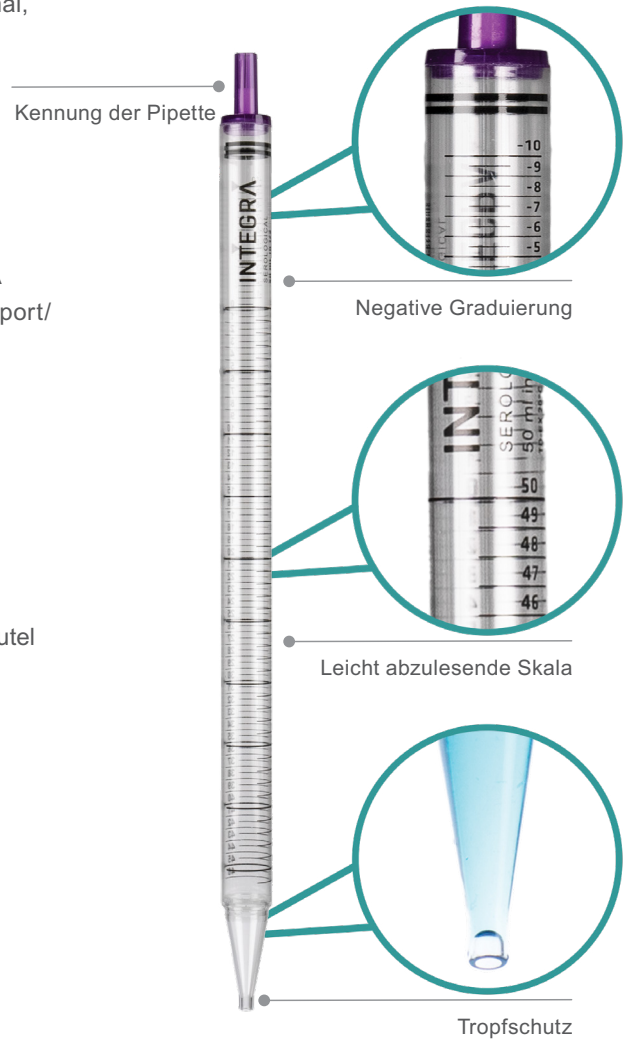

Wählen Sie, was am besten zu Ihnen passt

Der **PIPETBOY acu 2** ist die einzige Pipettierhilfe auf dem Markt, die in neun Farben verfügbar ist.

- Bringen Sie Farbe in Ihr Labor – wählen Sie Ihren Favoriten
- Weisen Sie den einzelnen Anwendungen bestimmte Farben zu, um sicherzustellen, dass jede Pipettierhilfe an ihrem Platz bleibt und sicheres Arbeiten gewährleistet wird



Bestellinformationen

Gerät	Farbe	Art.-Nr.
PIPETBOY acu 2 Pipettierhilfe mit lithium-Ionen-Akku, Netzadapter, sterilem 0,45-µm-Ersatzfilter und Wandhalterung Ein kostenloses Schweizer Taschenmesser gibt es bei jedem neuen PIPETBOY acu 2 dazu	classic	155 000
	grün	155 015
	rot	155 016
	blau	155 017
	transparent	155 018
	lila	155 019
	agave	155 022
	ocean dream	155 023
	pink sunrise	155 024



Zubehör	Art.-Nr.	
Ständer für PIPETBOY und VACUBOY	155 065	
Wandhalterung	155 521	
Netzadapter (100 – 240 VAC, 50/60 Hz)	EU-Version	153 210
	US-Version	153 211
	UK-Version	153 214
	AU-Version	153 216

	Art.-Nr.
Filter 0,45 µm	Steril/unsteril, siehe auch unsere Website für die länderspezifischen Artikelnummern
Filter 0,2 µm	Steril/unsteril, siehe auch unsere Website für die länderspezifischen Artikelnummern
Akku, Li-Ion	155 066

Serologische Pipetten

Einzel verpackte Pipetten	Art.-Nr.	Menge
1 ml	1401	1000
2 ml	1402	1000
5 ml	1403	200
10 ml	1404	200
25 ml	1405	200
50 ml	1406	100
100 ml	1407	100

Pipetten in Großmengen	Art.-Nr.	Menge
1 ml	1501	1000 (25 pro Packung)
2 ml	1502	1000 (25 pro Packung)
5 ml	1503	500 (25 pro Packung)
10 ml	1504	500 (25 pro Packung)
25 ml	1505	200 (25 pro Packung)
50 ml	1506	100 (25 pro Packung)
100 ml	1507	100 (10 pro Packung)

Technische Daten

Maximale Pipettiergeschwindigkeit	13,5 ml/s (mit einer 50-ml-Pipette)
Schwerkraftdispension	Leichter Druck auf die Dispensiertaste
Pipettenkompatibilität	Glas- und Kunststoffpipetten mit einem Volumen von 1 – 100 ml
Filterschutz	0,45 µm (enthalten) oder 0,2 µm (separat bestellen)

Gewicht	195 g
Betriebsbedingungen	5 – 40 °C, max. 80 % RH
Laufzeit	Min. 5500 Pipettierzyklen zu je 25 ml (mit vollständig aufgeladenem Akku)
Leistungsanforderungen	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Akku	Wiederaufladbar, lithium-Ionen, 500 mAh



Kontakt:

