

INTEGRA



PIPETBOY acu 2

轻便, 快速的血清学移液

备受全世界科学家信赖的电动助吸器

符合人体工程学的
电动助吸器

完美掌控
液体处理

高质量助吸器
适用于1至100ml移液管

轻便且符合人体工程学的移液管助吸器

独特的阀门和剂量系统，从逐滴的重力分配到快速的液体置换。

血清移液管标有清晰易读的双向刻度。

重量轻，符合人体工程学设计，可舒适的握持在手中，按下按钮时手指保持自然位置。

INTEGRA 血清学移液承诺

40多年以来，我们的PIPETBOY电动助吸器一直是使用广泛、值得信赖的移液辅助工具之一。它们提供了一种细致的移液解决方案，具有卓越的人体工程学设计和对液体吸取及分配速度的无与伦比的控制。

每一台PIPETBOY acu 2都附带了3年的保修服务*。如我们所有的电动助吸器一样，它们也能在INTEGRA的高品质血清移液管的加持下，如虎添翼。这些移液管的量程覆盖了1至100 ml，并且量程在25 ml以上的所有型号均采用了防滴漏设计，性能更优异。这意味着我们能为您提供一站式服务，满足您全部的血清学移液需求，并在您需要时提供支持和建议。

* 自产品注册起

** 必须配用INTEGRA血清移液管，才能使用重复分液模式。

💡 您知道吗？

除了PIPETBOY acu 2，我们提供了PIPETBOY GENIUS电动助吸器。PIPETBOY GENIUS在拥有PIPETBOY acu 2所有特点的基础上，增加了重复分液功能，一键即可完成，能够加快您的工作流程。**



性能

发现PIPETBOY acu 2的优势。

- 加速模式下, 移液速度更快 (使用50 ml移液管时最高13.5 ml/秒) *
- 可支持超过6.5小时的不间断移液操作
- 精确的移液和速度控制:
 - 最大速度可使用后侧的拇指滚轮设置
 - 由手指操作吸取和分液按钮, 可实现灵敏的液体操控 (最高至预设的最大速度)
 - 独特的阀门和剂量系统, 从逐滴的重力分配到快速的液体置换
- 轻巧 (195 g) 且采用了符合人体工程学的平衡设计。机身的大部分重量集中于握柄处, 握持手感舒适, 且在按压按钮时, 手指可以保持自然握姿。
- 不使用时可背置存放



* PIPETBOY acu 2必须连接电源才能使用加速模式, 不使用加速模式时的最大速度为11.5 ml/秒。

质量

- 超过40年的经验以及成千上万用户的青睐
- 可靠、高品质且注册后可享3年保修
- 防污染设计:
 - 0.2和0.45 μm 无菌/非无菌版适用于各种应用
 - 无菌模块 (前端部件) 可进行高压灭菌以用于严苛的应用



INTEGRA血清移液管

设计:

- 量程范围宽 (1-100 ml)
- 防滴漏设计 (25、50和100 ml移液管)
INTEGRA血清移液管的吸头设计可以降低液体滴漏的风险, 尤其是在较大体积液体的转移过程中。
- 移液管接口处的彩色标识, 可配合**PIPETBOY GENIUS**实现重复分液和防满溢功能。

质量


- 准确度为标称容积 $\pm 2\%$
- 透明聚苯乙烯材质
- 无菌, 非动物源材料
- 可登陆INTEGRA下载中心<https://www.integra-biosciences.com/en/support/downloads>, 轻松追溯批号

读取:


- 清晰易读, 双面刻度
- 负刻度可提供额外的工作量程

包装:

- 独立封装移液管为盒装
- 大包装移液管采用易开自封袋包装

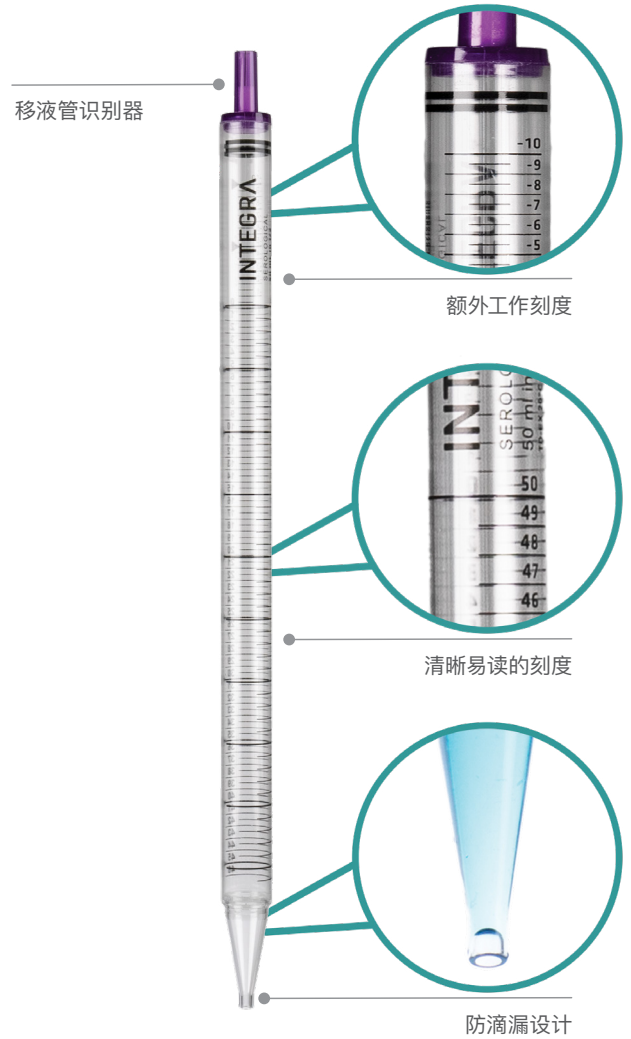

包装选项

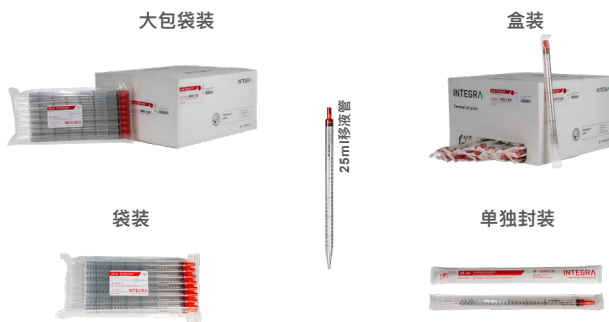

挑选最佳搭配

PIPETBOY acu 2是市面上少有的提供了9种配色可选的助吸器。

- 为您的实验室增添色彩 — 挑选您的最爱
- 为单个应用分配特定的颜色, 以避免混用, 更安全地工作



订货信息

仪器	颜色	货号
PIPETBOY acu 2 电动助吸器, 含锂离子锂电、电源适配器、0.45 μm 无菌滤芯以及墙壁支架 每把PIPETBOY acu 2附赠一个免费的瑞士军刀多功能工具	经典	155 000
	绿色	155 015
	红色	155 016
	蓝色	155 017
	透明	155 018
	紫色	155 019
	龙舌兰	155 022
	海洋之梦	155 023
	粉红日出	155 024



配件	货号	
PIPETBOY和VACUBOY支架	155 065	
墙壁支架	155 521	
电源适配器 (100-240 VAC, 50/60 Hz)	欧盟版	153 210
	美国版	153 211
	英国版	153 214
	非盟版	153 216

耗材	货号
0.45 μm 滤芯	灭菌/非灭菌, 请浏览我们的网站了解特定的货号
0.2 μm 滤芯	灭菌/非灭菌, 请浏览我们的网站了解特定的货号
锂离子电池	155 066

血清移液管

独立封装移液管	货号	数量
1 ml	1401	1000
2 ml	1402	1000
5 ml	1403	200
10 ml	1404	200
25 ml	1405	200
50 ml	1406	100
100 ml	1407	100

散装移液管	货号	数量
1 ml	1501	1000 (25支/包)
2 ml	1502	1000 (25支/包)
5 ml	1503	500 (25支/包)
10 ml	1504	500 (25支/包)
25 ml	1505	200 (25支/包)
50 ml	1506	100 (25支/包)
100 ml	1507	100 (10支/包)

技术参数

最高移液速度	13.5 ml/s (使用50 ml移液管)
重力分液	轻按分液按钮
移液管兼容性	1-100 ml量程的玻璃和塑料移液管
保护滤芯	0.45 μm (仪器附带) 或0.2 μm (单独另行订购)

重量	195 g
运行环境	5-40 $^{\circ}\text{C}$, 最大相对湿度80%
续航时长	至少5,500次25 ml移液循环 (满电量)
电源要求	100-240 VAC 50/60 Hz
电池	可充电, 锂离子电池, 500 mAh



联系我们:

