

# INTEGRA



**FLAMEBOY** 一键完成表面灭菌

# FLAMEBOY


使用便携式火焰喷枪进行表面灭菌是许多实验室常规流程, 用于防止细菌、真菌或病毒污染。尤其便于对易污染的点位或接触进行灭菌, 烘干生物反应器或发酵罐的潮湿表面, 或者用于加热物体。

FLAMEBOY是一款无需电池的便携式手持火焰喷枪, 按压按钮即可完成压电点火。安装燃气罐适配器后, 轻便的FLAMEBOY能够独立于任何燃气供应系统, 随时随地使用。火焰的大小和温度可通过空气调节器和燃气调节器轻松调节。

FLAMEBOY也可连接到燃气供应系统或燃气瓶, 作为实验室固定装置使用。




## 燃气源

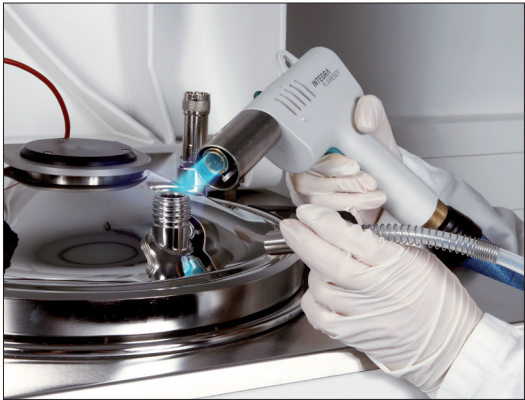

## 订购信息

| 仪器       |                                                                                                                                                                                  | 货号      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| FLAMEBOY | 自动火焰喷枪, 适用于丙烷/丁烷、天然气或民用燃气。包含: <ul style="list-style-type: none"><li>10 mm内径标准燃气软管适配器</li><li>1/4"燃气软管螺口连接器, 左旋螺纹</li><li>3个喷嘴, 分别用于丙烷/丁烷 (P80)、民用燃气 (M250) 和天然气 (N110)</li></ul> | 145 000 |
|          | 的自动火焰喷枪, 带气罐适配器, 适用于丙烷/丁烷、天然气或民用燃气, 包含: <ul style="list-style-type: none"><li>Campingaz CV 360 气罐适配器</li><li>3个喷嘴, 分别用于丙烷/丁烷 (P80)、民用燃气</li></ul>                                | 145 003 |
|          |                                                                                                                                                                                  |         |
| 配件       |                                                                                                                                                                                  | 货号      |
| 气罐适配器    | 用于Campingaz CV 360                                                                                                                                                               | 145 010 |
|          | 用于EXPRESS 444                                                                                                                                                                    | 145 120 |
| 连接器      | 用于10 mm内径标准燃气软管                                                                                                                                                                  | 143 550 |
| 螺口连接器    | 用于1/4"燃气软管, 左旋螺纹                                                                                                                                                                 | 143 220 |
| 燃气管      | 1/4", 两端带螺口连接器, 2.0 m, 通过DVGW认证*                                                                                                                                                 | 140 068 |

\*DVGW: 德国燃气和水科学技术协会 (燃气与水供应产品合格评定协会)



**INTEGRA Biosciences AG**  
瑞士, 齐策斯市 7205  
T +41 81 286 95 30  
F +41 81 286 95 33  
info@integra-biosciences.com

**INTEGRA Biosciences (Shanghai) Co., Ltd.**  
中国上海自由贸易试验区环科路515号1110室  
邮编: 201315  
电话: +86 21 5844 7203  
info-cn@integra-biosciences.com



www.integra-biosciences.com

