

## EVOLVE – 手動ピペット 容量調節を10倍以上の速度で



### シングルチャンネル

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
| 0.2 | - | 2 $\mu$ l     |
| 1   | - | 10 $\mu$ l    |
| 2   | - | 20 $\mu$ l    |
| 10  | - | 100 $\mu$ l   |
| 20  | - | 200 $\mu$ l   |
| 100 | - | 1,000 $\mu$ l |
| 500 | - | 5,000 $\mu$ l |



### 8、12、16チャンネル

|     |   |               |             |
|-----|---|---------------|-------------|
| 1   | - | 10 $\mu$ l    | (8, 12, 16) |
| 5   | - | 50 $\mu$ l    | (8, 12, 16) |
| 10  | - | 100 $\mu$ l   | (8, 12, 16) |
| 20  | - | 200 $\mu$ l   | (8, 12)     |
| 100 | - | 1,250 $\mu$ l | (8, 12)     |

## VIAFLO – 電動ピペット 緩み・液漏れ・落下のないGripTips システムの元祖



### シングルチャンネル

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
| 0.5 | - | 12.5 $\mu$ l  |
| 2   | - | 50 $\mu$ l    |
| 5   | - | 125 $\mu$ l   |
| 10  | - | 300 $\mu$ l   |
| 50  | - | 1,250 $\mu$ l |
| 100 | - | 5,000 $\mu$ l |



### 8、12、16チャンネル


|     |   |               |             |
|-----|---|---------------|-------------|
| 0.5 | - | 12.5 $\mu$ l  | (8, 12, 16) |
| 2   | - | 50 $\mu$ l    | (8, 12, 16) |
| 5   | - | 125 $\mu$ l   | (8, 12, 16) |
| 10  | - | 300 $\mu$ l   | (8, 12)     |
| 50  | - | 1,250 $\mu$ l | (8, 12)     |

## VOYAGER – チップ間隔可変電動ピペット 様々な実験容器間でサンプルを移動する際に



### 4、6、8、12チャンネル

|     |   |               |           |
|-----|---|---------------|-----------|
| 0.5 | - | 12.5 $\mu$ l  | (8, 12)   |
| 2   | - | 50 $\mu$ l    | (8, 12)   |
| 5   | - | 125 $\mu$ l   | (8, 12)   |
| 10  | - | 300 $\mu$ l   | (4, 6, 8) |
| 50  | - | 1,250 $\mu$ l | (4, 6, 8) |

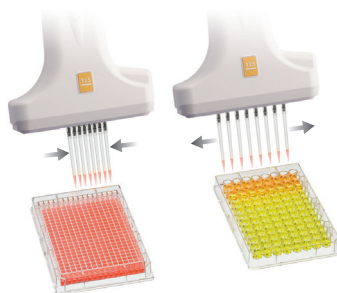

## MINI 96、VIAFLO 96、VIAFLO 384 – 電動ピペット ピペット作業の生産性、速度、再現性を大幅に向上



### MINI 96 96チャンネル

持ち運びしやすい  
手頃な価格



### VIAFLO 96 VIAFLO 384 24、96、384チャンネル

高い生産性  
高い汎用性

## ASSIST、ASSIST PLUS – 分注ロボット INTEGRAのマルチチャンネル電動ピペット、D-ONEシ ングルチャンネル分注モジュールを自動化\*\*



段階希釈  
プレートの充填  
試薬添加  
サンプルフォーマットの変更\*\*  
ヒットピッキング/チェリーピッキング\*\*  
ノーマライゼーション\*\*  
マスターミックスの作成\*\*



### D-ONE ASSIST PLUS 用シングルチャ ネル分注モジュール



## アプリケーション

### ピペット

- 吸引し全量吐出します

### 等量分注\*

- まとめて吸引し、分けて吐  
出します

### サンプル希釈\*

- 2種の液体をエアード分け  
て吸引した後、一度に吐出  
します

### ピペット/混合

- 吸引し全量吐出後にミキ  
シングします

### 手動ピペット\*

- 吸引量や吐出量を押ボタ  
ンでコントロールします

### リバースピペット

- 余分に吸って、目的量吐出  
します。粘性や揮発性の  
高い液体に適しています

### 可変量連続分注\*

- まとめて吸引し、異なる量  
に分けて吐出します

### 可変量連続吸引\*

- 異なる量を分けて吸引し、  
まとめて吐出します

### サンプル希釈/混合\*

- 2種類の液体をエアード分  
けて吸引した後、全量吐出  
し混合します

### 段階希釈

- 移動量を吸引し、吐出後  
に混合、これを指定回数  
繰り返します

\* 電動ピペット特有の機能

\*\* ASSIST PLUSでのみ利用可能

## WELLJET

コンパクト・低価格 試薬ディスペンサー、スタッカー式ディスペンサー

蓋付き・蓋なしいずれでも、6~1536ウェルプレートにハ  
ンズフリーで分注できます。専用EasySnap™分注カセット  
が、装置のランニングコストを低く抑えます



## アプリケーション

### WELLJET

- 高速で正確な非接触試薬分注
- ロースループットからハイスループットまで

## PIPETBOY acu 2

1 ml~100 mlのセロロジカル  
ピペットコントローラー



## PIPETBOY pro

LEDライト付き



## PIPETBOY

- 世界で最もポピュラーなセロロジカルピペットコントローラー
- 溶液の吸引・吐出時の細かく正確なコントロールは業界のベンチマーク

## VACUSAFE VACUBOY

安全な吸引システム  
2 Lまたは4 Lボトル



## VACUSIP

持ち運び便利な吸引システム  
500 mlボトル



## DOSE IT

操作が簡単なペリスタル  
ティックポンプ



## VACUSAFE / VACUBOY VACUSIP

- 生物実験廃液を安全に回収
- 研究室環境にマッチした静かな運転音

## DOSE IT

- 培養液の分注
- 一般的な連続分注作業

## Clear Advantage™ 試薬リザーバー 新開発SureFlo™チップ目詰まり防止配列を採用

10、25、100 ml ポリスチレンまたはポリプロピレン製のマルチチャンネル試薬リザーバー



25 ml ポリスチレンまたはポリプロピレン製分割試薬リザーバー、5 ml コンパートメントは極小デッドボリュームを実現



150、300 ml ポリスチレンまたはポリプロピレン製の試薬リザーバー (SBS標準規格)



## アプリケーション

### 試薬リザーバー

- 省スペースの使い捨てインサート。ベースは再使用可で環境に優しい
- はっきり見える容量目盛りで正確な充填
- SureFlo™チップ目詰まり防止配列により、最小のデッドボリューム