


INTEGRA

Choisissez le bon service pour votre MEDIACLAVE et MEDIAJET

INTEGRA recommande vivement de procéder une fois par an à la maintenance préventive du **MEDIAJET**. Ce service est obligatoire pour **MEDIACLAVE**. La maintenance par des techniciens qualifiés d'INTEGRA garantit :

- Un fonctionnement sûr de l'appareil
- Votre confiance dans le système lors de son utilisation
- Une longue durée de vie de l'appareil

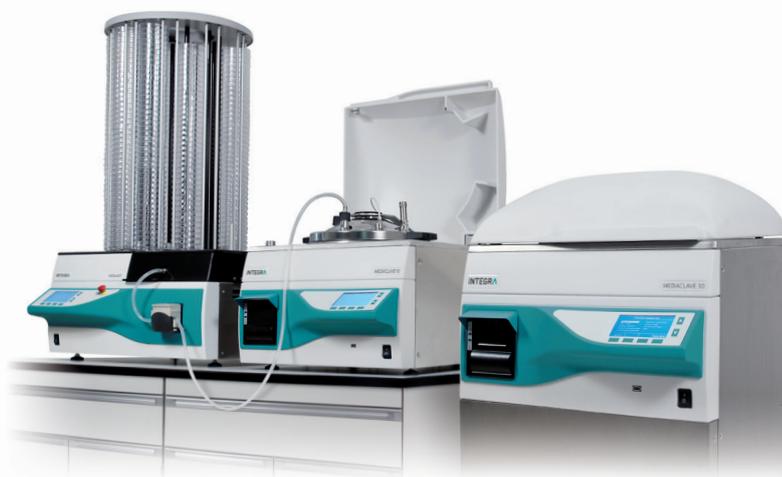

Choisissez selon les besoins de votre laboratoire et votre flux de travail entre trois services de maintenance sur site :

BASIC LIGHT Service

Le programme BASIC LIGHT est une option peu coûteuse pour les clients qui souhaitent que leur équipement fonctionne en toute sécurité. Cette inspection annuelle permet de s'assurer que votre équipement répond aux normes de sécurité, ce qui vous procure une certaine tranquillité d'esprit, mais sans la couverture supplémentaire de l'entretien ou des réparations.

BASIC Maintenance préventive

Le programme BASIC comprend la maintenance annuelle de l'instrument dans votre laboratoire. Ce service permet de garantir la fiabilité de votre équipement et d'assurer qu'il est conforme aux normes de fabrication originales d'INTEGRA.

PLATINUM Maintenance préventive

Le programme PLATINUM comprend les mêmes prestations que le programme BASIC. Les clients du programme PLATINUM bénéficient en plus d'un pack zéro souci couvrant tous les frais de réparation pouvant survenir durant l'année avec un délai de réponse prioritaire.

Étendue du service	BASIC LIGHT	BASIC	PLATINUM
MEDIACLAVE 10/30 Contrôle de sécurité <ul style="list-style-type: none"> • Contrôle du capteur de pression / MEDIACLAVE • Contrôle du capteur de température (chauffage + fluide) / MEDIACLAVE • Contrôle de la soupape de sécurité / MEDIACLAVE • Vérification de la cuve, y compris la fermeture à baïonnette du couvercle de la cuve et l'interrupteur d'alimentation / MEDIACLAVE • Contrôle du joint du couvercle, des bouchons de cuve et du disque de rupture / MEDIACLAVE • Vérification de la présence de toutes les étiquettes d'avertissement / MEDIACLAVE • Contrôle du couvercle de sécurité / MEDIACLAVE 			
MEDIAJET : Contrôle de sécurité et d'alignement <ul style="list-style-type: none"> • Vérification de la présence de toutes les étiquettes d'avertissement • Contrôle du couvercle de sécurité • Vérification de l'alignement du carrousel / rotor et de l'unité d'empilage de l'alimentateur 			
Mise à jour du firmware si disponible et sur demande	✓	✓	✓
Programmation prioritaire pour la réalisation du service	-	✓	✓
Maintenance préventive de l'unité de base <ul style="list-style-type: none"> • Test opérationnel • Vérification des pièces mécaniques et électriques • Contrôle de l'usure 	-	✓	✓
Documentation détaillée de la maintenance préventive avec liste de contrôle	-	✓	✓
Test de fonctionnement avec vérification métrologique température/pression (MC) / Test de fonctionnement avec alignement de position (MJ)	-	✓	✓
Étiquette indiquant que la maintenance a été effectuée sur l'instrument	-	✓	✓
Y compris pièces et main d'œuvre pour les réparations et le remplacement des pièces usées de l'appareil	-	-	✓
Service prioritaire en cas de mauvais fonctionnement, y compris la réparation	-	-	✓
Garantie d'un an à compter de la date du contrat, incluant le matériel et la main d'œuvre pour les réparations	-	-	✓


Demande de renseignements sur la maintenance préventive sur site

Référence article

Description	BASIC LIGHT	BASIC	PLATINUM
Programme de maintenance préventive MEDIACLAVE	999335	999130	999140
Programme de maintenance préventive MEDIAJET	999336	999131	999141

Remarques :

- Pour des raisons de sécurité, **MEDIACLAVE** nécessite des intervalles de maintenance de 1 an ou 1000 cycles, selon la première éventualité.
- Les instruments doivent être neufs ou en parfait état de fonctionnement pour pouvoir souscrire un contrat PLATINUM.
- Les contrats PLATINUM ne sont disponibles que pour les instruments de 10 ans maximum ou moins de 10 000 cycles **MEDIACLAVE**.

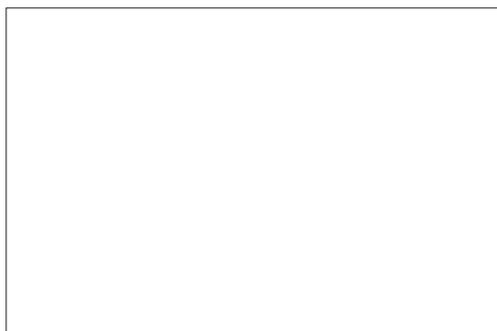

Nous contacter :



www.integra-biosciences.com