

INTEGRA



PIPETBOY acu 2 更轻，更快—最受欢迎的移液器再次升级

续航时间更长

PIPETBOY acu 2采用了最新的锂离子电池技术, 无记忆效应。只需充电3.5小时, 即可连续移液超过6.5小时。



LED电池指示灯的红绿切换可直观指示仪器的充电状态。

多彩

PIPETBOY acu 2有六种颜色可选, 您可以按颜色为特定应用分配仪器, 避免混用, 更加安全稳妥。当然, 您也可以凭喜好选择, 为实验室带来一些色彩!

PIPETBOY acu 2巧妙的设计能够背面向下稳固地放置在台面上。



技术参数

最高移液速度	13.5 ml/s (50ml 移液管)
重力分液	轻按分液按钮
移液管兼容性	1-100 ml量程的玻璃和塑料移液管
过滤器保护	0.45 μm (仪器包含) 或0.2 μm (单独订购)



安全在心

疏水过滤器为PIPETBOY acu 2提供了可靠的保护, 能防止气溶胶和液体造成的污染和损坏。

过滤器易于更换, 并提供两种规格 (0.45和0.2 μm) 以及灭菌和非灭菌选项, 适合每一种实验室应用。

如果需要处理重要液体, 可对包括硅胶移液管固定器和滤器橡胶在内的前端组件进行高压灭菌。



值得信赖的质量

PIPETBOY移液控制器依照最高质量标准设计和制造, 登记后可获得长达3年的质保。



重量	195 g
运行环境	5-40°C, 最大相对湿度80%
续航能力	至少5500次25ml移液循环 (满电量)
电源要求	100-240 VAC, 50/60 Hz
充电电池	500 mAh 锂离子电池

PIPETBOY acu 2

INTEGRA拥有四十余年的移液处理经验，数十万产品遍布世界各地，我们的移液管控制器已经成为精准、高效移液管移液的标准。

第二代 PIPETBOY acu配备了最新技术，移液速度更快，重量更轻。这两大特点将助您缩短工作时间，并为您提供更好的人体工程学移液体验。除此之外，PIPETBOY acu的主要优点均得以保留：无与伦比的移液精度，多彩的外观以及重量的平衡。总而言之，我们深信，世界上最受欢迎的移液器已再次升级！

更轻

PIPETBOY acu 2的设计遵循了人体工程学塑形建议，可舒适握持，让您的手指在整个移液过程中保持自然姿势。PIPETBOY acu 2仅重195克，并具有最优化的重量平衡，可为您提供更好的人体工学体验，即使长时间移液也毫无压力。




更快

PIPETBOY acu 2配备了独特设计的电机，可提供多种移液速度，适用于市面上所有1至100 ml移液管。根据您的应用，只需单手调节仪器背面的拇指旋轮即可轻松设定常用的移液速度。使用大量程移液管时，全新的加速模式可以额外提高20%的移液速度。只需连接电源，即可获得市面上最快的移液管控制器。

无与伦比的移液控制

得益于独特的阀门和计量系统，所有PIPETBOY移液控制器都能提供无与伦比的移液速度控制，从逐滴或重力分液到快速的液体转移。移液速度可由指尖轻松调节，让您获得对移液管液位的灵敏控制。

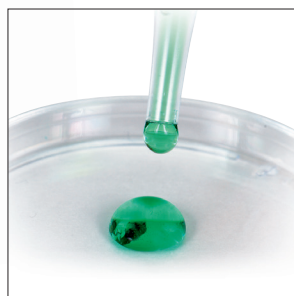

订购信息

仪器	主题色	货号
PIPETBOY acu 2 移液控制器, 含锂离子电池, 电源适配器, 备用0.45 µm无菌滤器和壁挂钩	经典	155 000
	绿色	155 015
	红色	155 016
	蓝色	155 017
	透明	155 018
	紫色	155 019

配件	货号
1 支架 适用于PIPETBOY和VACUBOY	155 065
壁挂钩	155 521
电源适配器 (100–240 VAC, 50/60 Hz)	欧盟版 153 210 美国版 153 211 英国版 153 214 非盟版 153 216

耗材	货号
电池盒盖	经典 155 203
	绿色 155 160
	红色 155 161
	蓝色 155 162
	透明 155 163
	紫色 155 164


2 O形圈		153 235
3 无菌模块外壳, 含O形圈 蓝绿色	155 230	
	灰色	155 060
4 滤器橡胶 硅胶, 用于在无菌模块中固定滤芯		153 225
5 滤芯	0.45 µm	灭菌 153 015
		非灭菌 153 016
	0.2 µm	灭菌 156 608
		非灭菌 156 607
6 移液管固定器 硅胶, 用于在无菌模块中固定移液管		151 020
7 无菌模块	完整模块, 适用于经典版和透明版	蓝绿色 155 025
	完整模块, 适用于绿色、红色、蓝色和紫色版本	灰色 155 070
	适用于PIPETBOY acu 2, 锂离子电池	155 066



每台新PIPETBOY acu 2都包含一个免费赠送的Swiss多功能工具。



PIPETBOY和VACUBOY支架是在细胞培养柜中工作的理想配件。它能够保持工作区域的整洁有序, 无论PIPETBOY acu 2是否装有移液管, 都可以随时取用。

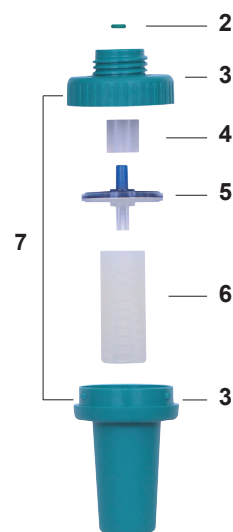

CE
Swiss made



INTEGRA Biosciences AG
瑞士, 齐策斯市 7205
T +41 81 286 95 30
F +41 81 286 95 33
info@integra-biosciences.com



www.integra-biosciences.com

INTEGRA Biosciences (Shanghai) Co., Ltd.
中国上海自由贸易试验区环科路515号1110室
邮编: 201315
电话: +86 21 5844 7203
info-cn@integra-biosciences.com

INTEGRA